An anatomical illustration of a human spine and ribcage, viewed from the back. The spine is highlighted in a light purple color, and the ribcage is shown in a light blue color. The text is overlaid on the spine.

BIOPSYBELL
CIFOPACK


Acesso Directo
11G

SPINE PACK

EN-ES

CIFOPACK 11G

KYPHOPLASTY FAST APPROACH KIT
KIT PARA CIFOPLASTIA ACCESO RAPIDO

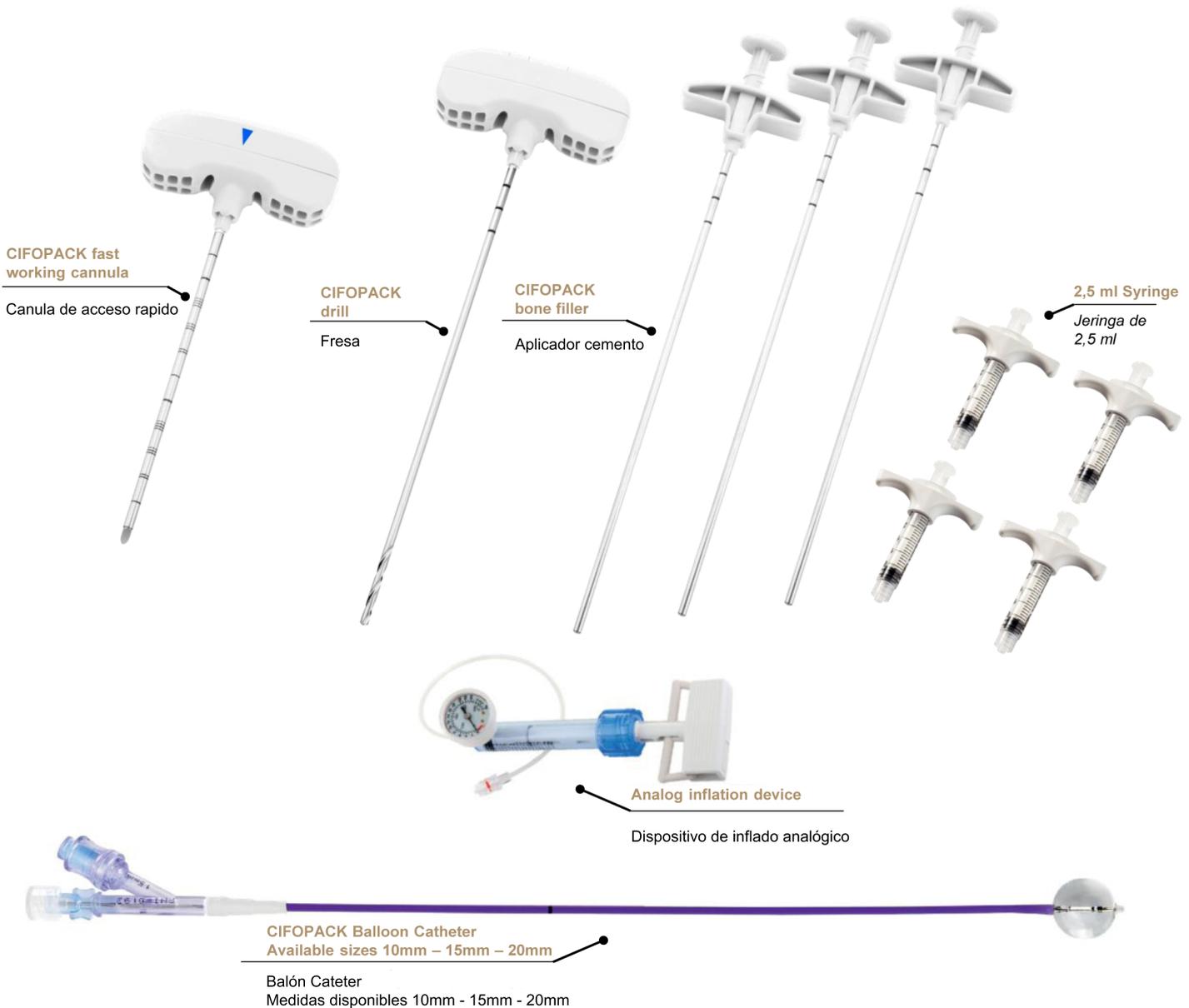

EN **CIFOPACK** is a minimally invasive system to treat fractures, restore vertebral body height and reduce back pain. A vertebral compression fracture (VCF) occurs when the vertebral body fractures and collapses due to osteoporotic conditions, tumors (eg. myeloma) or trauma.

After inserting and inflating the balloon catheter into the cavity, the initial anatomical vertebral body condition can be restored. The balloon catheter is then deflated and the cavity created is now filled with bone cement avoiding any leakage.

ES **CIFOPACK** es un sistema miniamente invasivo para poder tratar fracturas, restablecer la altura vertebral y reducir el dolor. Una fractura vertebral por compresión (VCF) ocurre cuando la fractura del cuerpo vertebral se colapsa por osteoporosis, tumor (ej. mieloma) o por traumatismo.

Después de insertar e hinchar el balón catéter dentro de la cavidad, las condiciones del cuerpo vertebral pueden ser restablecidas. EL balón catéter se deshincha y la cavidad creada es ahora rellena con cemento oseo, evitando cualquier fuga.

BENEFICTS

EN

- Ultimate minimally invasive solution
- A single treatment solution from the cervical to the lumbar vertebrae
- Fast approach: direct percutaneous vertebral access and reduced number of surgical steps
- Less invasive and less traumatic treatment
- Reduction of back pain
- Fast recovery after treatment
- Cement injecton cannulas (bone fillers) included in the kit are compatible with low and medium viscosity cement. With high viscosity cement, P-INJECT is recommended

BENEFICIOS

ES

- Última solución mínimamente invasiva
- Una sola solución para tratar vértebras cervicales a lumbares
- Acceso rápido: Acceso percutáneo directo vertebral, reduce el número de pasos durante la cirugía
- Tratamiento menos invasivo y menos traumático
- Reduce el dolor de espalda
- Recuperación rápida después del tratamiento
- Los aplicadores de cemento incluidos en el kit, son compatibles con cemento de baja y media viscosidad. Con cementos de alta viscosidad, es recomendado usar el sistema P-INJECT

KIT COMPOSITION / Composición del kit

COMPONENTS / COMPONENTES	MONOLATERAL	BILATERAL
n. 1 CIFOPACK FAST WORKING CANNULA (bevel or trocar tip) n. 1 CIFOPACK DRILL / Fresa		
n. 1 CIFOPACK FAST WORKING CANNULA BEVEL TIP n. 1 CIFOPACK FAST WORKING CANNULA TROCAR TIP n. 1 CIFOPACK DRILL / Fresa		
n. 1 CIFOPACK BALLOON CATHETER / Balón Catetér		
n. 2 CIFOPACK BALLOON CATHETERS / Balón Catetér		
n. 1 ANALOG INFLATION DEVICE / Dispositivo Hichado Analógico		
n. 2 ANALOG INFLATION DEVICE / Dispositivo Hichado Analógico		
n. 3 CIFOPACK BONE FILLERS + 4 2,5ml SYRINGES		
n. 6 CIFOPACK BONE FILLERS + 4 2,5ml SYRINGES		



Produttore: **BIOPSYBELL S.R.L.**
Via Aldo Manuzio 24 - 41037 Mirandola – MO
C.F./P.Iva 02615000367 - www.biopsybell.it

Rev.01 del 09-03-2020